

SÅ VÄLJER DU

RÄTT SKÖNHETS PRODUKT

Introduktion och djupgående jämförelse av
vår The Fox och The Lynx

Vilken ska du välja?



Optimalt Val för Strålande Hud och Skönhet: The Fox eller The Lynx?

Rödljusterapi för strålande hud och skönhet har snabbt blivit en populär trend inom skönhetsindustrin. Vi presenterar två ledande produkter – The Lynx och The Fox – som erbjuder flexibel och effektiv hudvård. Genom att fokusera på deras unika egenskaper kommer vår jämförelse att belysa vilken rödljusprodukt som bäst passar dina behov. Vi granskar deras visuella attribut, funktionalitet och fördelar ur ett skönhetsperspektiv. Denna jämförelse syftar till att tydligt framhäva varje enhets unika förmågor och hur de kan integreras i olika skönhetsrutiner för att optimera ditt skönhetsresultat.



Användning och flexibilitet

Både The Fox och The Lynx representerar banbrytande innovationer inom ljusbehandlingsteknik för att främja både skönhet och hälsa. The Fox är en anpassningsbar panel som kan riktas mot olika kroppsområden, inklusive ansikte och dekolletage. Den flexibla designen möjliggör skräddarsydda behandlingar med olika ljusvåglängder (rött och nära infrarött ljus) för att främja hudens välbefinnande.

The Lynx är en LED-silikonmask designad för direktapplikation på ansiktet och dekolletaget. Detta erbjuder en nära kontakt med huden för djupgående ljusbehandlingar som specifikt främjar hudens hälsa och skönhet. Tack vare att The Lynx är tillverkad av silikon, gör det att masken är följsam och perfekt anpassningsbar till ansiktets konturer. Denna flexibilitet möjliggör en exakt och fokuserad behandling, riktad mot specifika områden för att ge optimala resultat för din hudvård. Med sin följsamma design formar sig The Lynx smidigt efter ansiktets kurvor, vilket säkerställer att ljusbehandlingen når varje önskat område effektivt och jämnt.

Vår hud på dekolletage är lika viktig att ta hand om som ansiktets hud, då den också är exponerad för solens skadliga strålar och yttre påfrestningar. The Fox, med sitt stativ, erbjuder en utmärkt möjlighet att rikta ljusbehandlingen mot dekolletageområdet, vilket är särskilt fördelaktigt för att vårda och skydda denna tunna och ofta solpåverkade hud. Förutom ansiktsmasken inkluderar The Lynx en specialdesignad LED-mask för dekolletageområdet. Denna funktion gör det möjligt att skapa en komplett skönhetsrutin som optimerar hudvården både för ansikte och dekolletage.

Olika våglängder och ljus

The Fox kombinerar det vetenskapligt beprövade röda ljuset (660 nm) och det nära infraröda ljuset (850 nm) för att främja hudens hälsa och skönhet. Det röda ljuset, med en våglängd på 660 nm, erbjuder fördelar som ökad kollagenproduktion, förbättrad blodcirkulation och antiinflammatoriska egenskaper. Detta bidrar till att reducera synliga rynkor, förbättra hudens näringsupptag och minska rodnad. Å andra sidan når det nära infraröda ljuset med en våglängd på 850 nm djupare in i hudlagren och främjar cellreparation, cellförnyelse samt produktionen av elastin för en fastare hudstruktur.

The Lynx har som The Fox det röda ljuset även rött ljus, men utöver det 5 ytterligare färger som främjar skönhet utifrån olika behov.

NIR-fria och NIR fördelar

The Lynx LED-mask, skillnad från The Fox, har vi aktivt valt att inte inkludera nära infrarött ljus (NIR) på grund av dess eventuella inverkan på fettceller. NIR har potentialen att stimulera fettceller, vilket i vissa fall kan påverka hudens elasticitet och utseende, särskilt vid anti-aging-behandlingar.


Genom att medvetet avstå från NIR i The Lynx har vi fokuserat på att bibehålla balansen för hudens välbefinnande när masken appliceras direkt på ansiktet eller dekolletaget. Detta beslut syftar till att säkerställa att de förväntade positiva effekterna på hudens utseende upprätthålls under användning.

Det är dock viktigt att påpeka att frånvaron av NIR i The Lynx inte betyder att NIR saknar sina egna positiva aspekter. Både masken och The Fox-panelerna erbjuder olika fördelar och ljusvariationer som var och en kan vara fördelaktiga för olika hudvårdsbehov. Vid val av produkt är användarvänlighet en väsentlig faktor att ta hänsyn till för att säkerställa att produkten passar dina personliga behov och önskemål för skönhetsvård.




RÖTT LJUS (630NM)

Stimulerar produktionen av kollagen och hjälper till att krympa porerna.

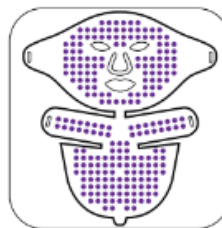

LILA LJUS (640NM)

Accelererar blodcirkulationen och främjar hudvårdsaktivering.

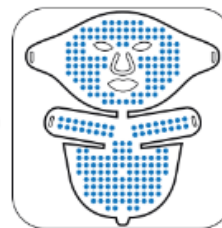


BLÅTT LJUS (470NM)

Hjälper till att minska inflammation och akne, har en lugnande effekt, speciellt vid allergier.




GRÖNT LJUS (520NM)

Minskar fina linjer, ger näring till huden och påskyndar sårläkningsprocessen.

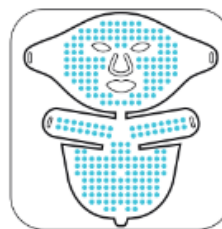


CYAN LJUS (540NM)

Främjar syntesen av protein och kollagen, aktiverar huden.

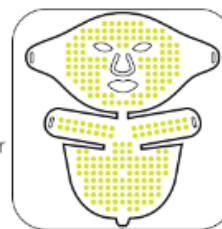

GULT LJUS (590NM)

Accelererar blodcirkulationen, främjar hudvårdsaktivering och förbättrar fet hud och akne.

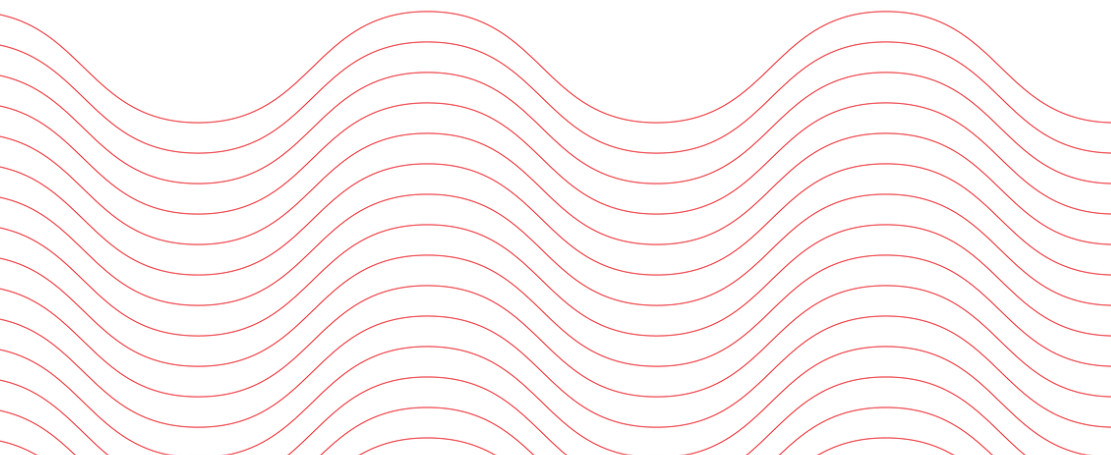

Behandlingstid

Kontinuerlig användning är avgörande för att uppnå effektiva resultat inom rödlys- eller ljusbehandling. Dessa behandlingar kan genomföras dagligen eller enligt individuella behov och toleransnivåer. För vissa kan det krävas gradvis anpassning över tid för att bygga upp toleransen, medan andra kan utföra fullständiga behandlingar varje dag med en stabil grundtolerans. Att inleda med kortare sessioner och successivt öka tiden rekommenderas för att gradvis anpassa sig. En optimal dagsbehandling är vanligtvis omkring 20 minuter dagligen.

Med The Fox kan du antingen fokusera hela behandlingstiden med ljuset riktat framåt eller dela upp tiden för att behandla varje sida av ansiktet separat. Om vissa områden, som kinderna ut mot öronen, behöver mer behandling är det fördelaktigt att rikta ljuset mot dessa områden.

The Lynx ger en enhetlig behandling över hela ansiktet och anpassar sig till ansiktets form. Även här kan du anpassa fördelningen av behandlingstiden baserat på olika ljuspreferenser enligt behov. För de som önskar behandla ansiktet med samtliga våglängder, erbjuder The Lynx ett sjunde ljus som kombinerar samtliga våglängder i en behandling.

Pulsering och variationer av ljus

Pulsering eller frekvenser i rödlysbehandling refererar till variationen i hur ljuset pulserar eller blinkar med en viss hastighet. Dessa olika pulseringshastigheter kan påverka hur ljuset levereras till huden och hur det kan påverka cellerna och vävnaderna. Det bästa valet beror på behandlingens syfte och individuella preferenser. The Fox levererar pulseringar i olika hastigheter i ett spann mellan måttlig till snabb puls och med både det röda ljuset och nära infra röda ljuset. Måttlig, medel och snabb puls ger olika effekter:

- Måttlig puls: En långsammare rytm i ljuset, främjar avslappning och kan minska stress i huden.
- Medel puls: Jämnare variation i ljusintensitet, förbättrar cirkulationen och stödjer kollagenproduktionen för fastare hud.
- Snabb puls: Aktiverar cellaktivitet snabbare, vilket kan reducera fina linjer och förbättra hudtonen.

The Lynx presenterar en unik pulseringsfunktion med varierande färgspektrum mellan ljusen. Denna unika funktion kan liknas vid en djupare penetration av varje ljus färgs egenskaper i huden. Den möjliggör en mer intensiv behandling för ökad effektivitet vid hudvårdsrutiner.

Design och utformning

The Fox är en praktisk bordspanel med ett justerbart stativ som möjliggör riktningen av ljuset efter individuella behov och önskemål. Eftersom panelen är ansluten till ett uttag under behandlingen, sker behandlingssessionen på en stationär plats. The Lynx är en uppladdningsbar LED-mask med USB-C som ger ökad flexibilitet för användaren. Den kan användas mer fritt medan du utför andra aktiviteter. Masken fästs med ett justerbart spännband runt huvudet för att säkra den på plats medan kontrollpanelen enkelt kan placeras i fickan för att frigöra händerna. Detta gör The Lynx mer portabel och användbar under rörlighet, medan The Fox ger en behandling som lämpar sig bäst stillasittande.



The Lynx och The Fox: Det Slutliga Beslutet för Din Skönhetsvård

Både The Fox och The Lynx utgör utmärkta val för att främja en strålande hud och förbättra skönhetsaspekterna. Ditt val mellan dessa två beror på dina specifika behandlingspreferenser och önskade resultat. The Fox erbjuder en allsidig användning som sträcker sig över både ansikte och dekolletage, medan The Lynx presenterar en skräddarsydd, bärbar lösning med flera färgalternativ för att tillgodose individuella behov. Dessa produkter representerar det ultimata valet för att ge din hud den önskade behandlingen och den förtjänade omsorgen för en strålande och förbättrad skönhet.